

Buste di prodotto liquido
Gusto Pera
DISPOSITIVO MEDICO CE0426

- **Utile per la corretta funzionalità intestinale**
- **Utile per il trattamento dei sintomi associati alla sindrome del colon irritabile**
- **Favorisce la normalizzazione della flora batterica intestinale**
- **Utile per ridurre il gonfiore, dolori addominali e crampi**

1. Identificazione, composizione e finalità di utilizzo del dispositivo medico

REDISOLV® ha un'elevata capacità di legare l'acqua, come una spugna, contribuendo a ridurre i sintomi dell'intestino irritabile. In caso di stipsi, la sostanza cede l'acqua alle feci, aumentando il volume e diminuendo la durezza. In caso di diarrea, la sostanza continua a legare l'acqua nel colon, contribuendo a consolidare le feci. L'effetto prebiotico della sostanza aiuta inoltre a ripristinare la normale flora intestinale. L'aggiunta di simeticone può contribuire ad assorbire gas intestinali contribuendo a ridurre il dolore addominale e i crampi.

1.1 Meccanismo di Azione

Il dispositivo medico contiene gomma di guar parzialmente idrolizzata e simeticone che agiscono in sinergia nel trattamento dei sintomi associati alla sindrome del colon irritabile.

La gomma di guar assorbe un grande quantitativo di acqua nello spazio luminale, rigonfiando le feci che aumentano quindi la propria massa. Nello stesso tempo, le fibre sono utili nel ridurre la gravità e la frequenza delle scariche diarroiche grazie alla loro capacità di assorbire e neutralizzare tossine esogene ed endogene. La gomma di guar, inoltre, regolarizza le funzioni intestinali, incrementa l'idratazione delle feci, lubrifica e favorisce la massa fecale.

Inoltre, lega le sostanze nocive, come gli acidi biliari

5. Effetti Indesiderati

Raramente può verificarsi un aumento della produzione di gas gastrointestinale dovuto alla gomma di guar parzialmente idrolizzata; l'effetto è prontamente risolto dalla presenza nel prodotto del simeticone.

In caso di effetti indesiderati inattesi, sospendere l'assunzione di REDISOLV®.

6. Interazioni con Farmaci e Integratori Alimentari

Il dispositivo medico può ritardare o ridurre l'assorbimento di farmaci e/o integratori alimentari assunti contemporaneamente.

In ogni caso, è consigliato distanziare l'assunzione di REDISOLV® almeno 2 ore da quella di farmaci o integratori alimentari.

Inoltre, in caso di assunzione contemporanea di contraccettivi orali, farmaci per la tiroide o ormoni tiroidei e antibiotici assumere REDISOLV® solo dopo aver consultato il medico.

I componenti del prodotto hanno effetti ipoglicemizzanti che possono associarsi a quelli determinati da farmaci antidiabetici; di conseguenza, i pazienti diabetici devono consultare il medico prima di assumere REDISOLV®.

7. Modalità di conservazione

Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di luce e di calore: aprire la busta solo al momento dell'assunzione.

Non utilizzare in caso di busta danneggiata.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare il prodotto a temperatura non superiore a 25°C.

8. Avvertenze e Controindicazioni

Non utilizzare il prodotto al di sotto dei 12 anni.

In gravidanza o allattamento assumere solo in caso di reale necessità e dopo aver consultato il medico.

Si consiglia di non assumere quantitativi maggiori di quelli indicati, in quanto dosi più alte possono causare l'insorgenza di effetti avversi inaspettati.

Non utilizzare per più di 30 giorni consecutivi; se i sintomi persistono consultare il medico.

Ogni busta è monouso e va aperta solo al momento dell'utilizzo.

Non assumere in caso di intolleranza al prodotto.

eccedenti, favorendone l'eliminazione. Il simeticone ha spiccate proprietà tensioattive che contrastano la flatulenza e l'eccesso di gas gastrointestinale. Inoltre, il simeticone drena la schiuma che tipicamente si genera nello stomaco dispeptico.

1.2 Composizione

Ciascuna busta di prodotto liquido pronto all'uso contiene gomma di guar parzialmente idrolizzata e simeticone.

Eccipienti: acqua, glicerina vegetale, sucralosio, acido citrico, aroma pera, potassio sorbato, sodio benzoato, polisorbato 80, esteri del saccarosio.

2. Confezione

Un astuccio contiene 14 buste di prodotto liquido.

Ciascuna busta contiene 30 mL di prodotto.

3. Dosaggio e modalità di assunzione

Assumere 1 busta al giorno.

È possibile aumentare il dosaggio a 2 buste al giorno.

Il prodotto può essere assunto direttamente dalla busta o diluito in acqua o in altre bevande (succhi, yogurt).

La durata consigliata del trattamento è di quattro settimane (28 giorni). Se dopo questo periodo non si è ottenuto un miglioramento sensibile dei sintomi, consultare il medico.

4. Controindicazioni

L'utilizzo del dispositivo è controindicato nei casi di ernia iatale, restringimento esofageo o ostruzioni intestinali.

Prima di un intervento chirurgico programmato è consigliabile interrompere il trattamento per almeno 2 settimane.

Il prodotto può ostacolare l'azione di alcuni reagenti utilizzati nella diagnostica quali la gomma guaiaco.

Non assumere in caso di ipersensibilità nota al prodotto, ad uno dei componenti, al simeticone o alla gomma di guar.

Non assumere in caso di ipersensibilità nota ai componenti, alla gomma di guar ed al simeticone.

9. Scadenza

Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.


La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

10. Smaltimento

Il dispositivo scaduto o comunque da eliminare deve essere gestito come da regolamento di gestione dei rifiuti dell'Ente Gestore Locale.

Non disperdere in nessun caso il prodotto o la sua confezione nell'ambiente

Ultima Revisione: Settembre 2022

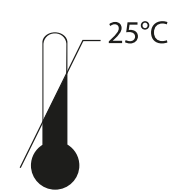

SIIT srl

Via Ariosto 50/60

20090 Trezzano sul Naviglio (MI) - ITALY



Distributore:

Aurora Biofarma S.r.l.

Via Porpora, 127

20131 Milano (MI) - ITALY

URV 072022

